

日歯生涯研修事業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書
(Windows 7 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 7 へのインストール手順	3
1. インストール前の確認事項	3
2. インストール手順の概略説明	4
3. 新規インストール	5
4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合	14
5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合	15
6. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合	16
7. アプリケーションの削除方法	17

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 7 へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。
本インストール手順書は Windows 7 用 の手順書です。

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 7 Home Basic 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Home Premium 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Professional 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Enterprise 32 bit (x86) , 64bit ・ Windows 7 Ultimate 32 bit (x86) , 64bit <p style="text-align: center;">※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。</p>
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 <li style="padding-left: 20px;">※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。 ・ NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証できません。 (※ 但し、動作することは確認しています。)
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パスリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は [IC カード用研修受付ソフト] のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。


3. 新規インストール

SETUP1.

E-system より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル
 (「AttendSeminar_Install.EXE」) を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダにコ
 ピーします。

【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、E-system からの取得方法を示します】

- (1) **E-system** の「メニュー」から「研修用ソフトダウンロード」をクリックします。

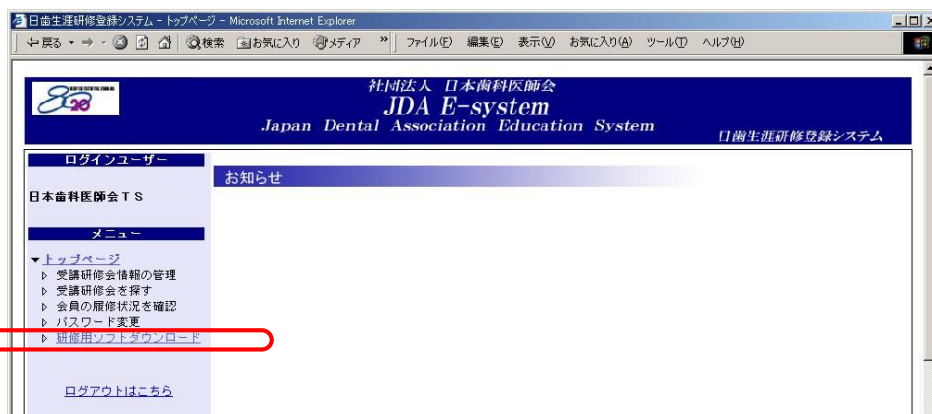


- (2) 「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。


- ① 「インストール手順書」
- ② 「プログラム」 ⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar_Install.EXE)のことです
- ③ 「操作説明書」



- (3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム (各 OS 共通)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。「保存」ボタンを押してください。

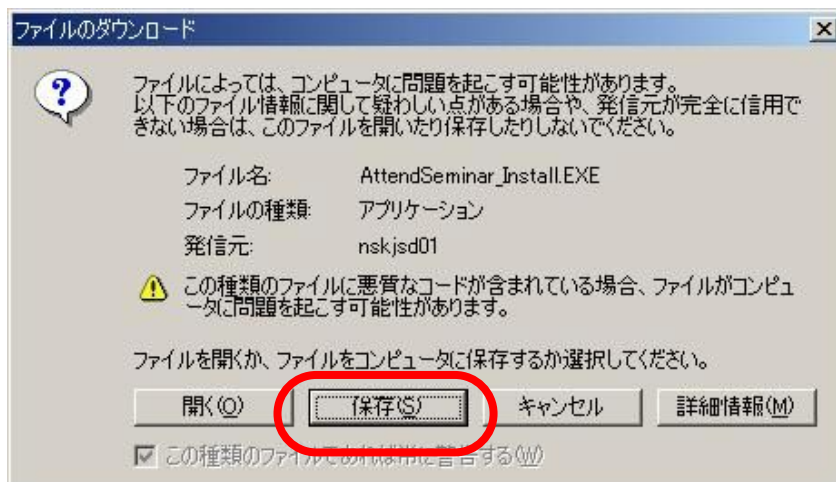

- (4) 上記画面の「保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。

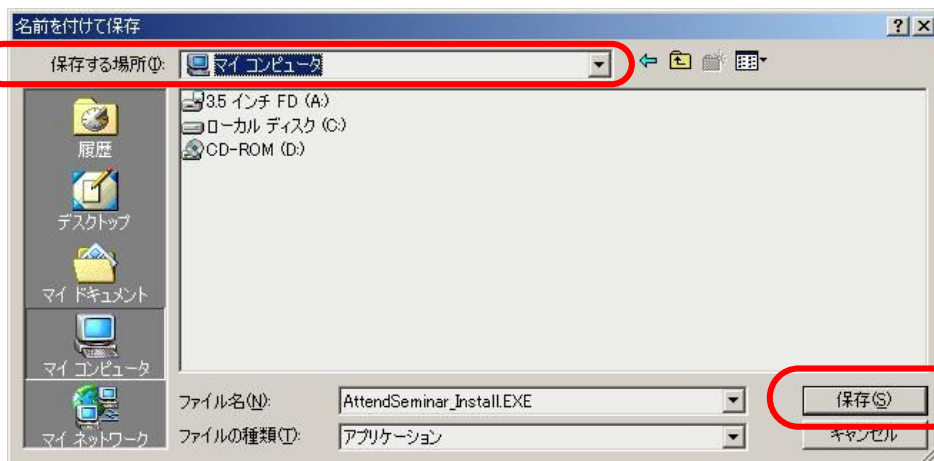

- (5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。




【ご注意】

プログラムのダウンロードには、時間(5~10分)が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

- (6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「閉じる」ボタンを押して下さい。

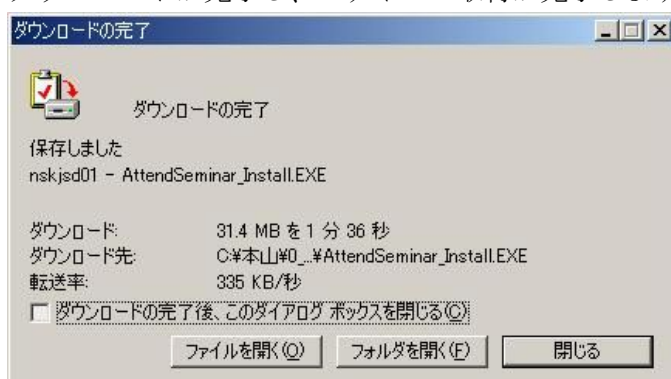


必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

SETUP2.

「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。

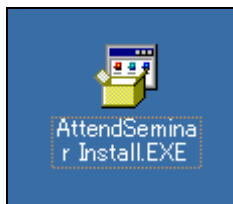

今回より基本的にインストーラを「2回」動かしてインストールが完了するようになりました。


- 1回目: 「Felica Port Software」のインストール
- 2回目: 「IC カード用研修受付ソフト」のインストール

SETUP3.

次のメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合は

「AttendSeminar_Install.EXE」と表示されていることを確認し、「はい」ボタンをクリックして下さい。

「AttendSeminar_Install.EXE」以外の表示がなされている場合は、「いいえ」ボタンをクリックして下さい。

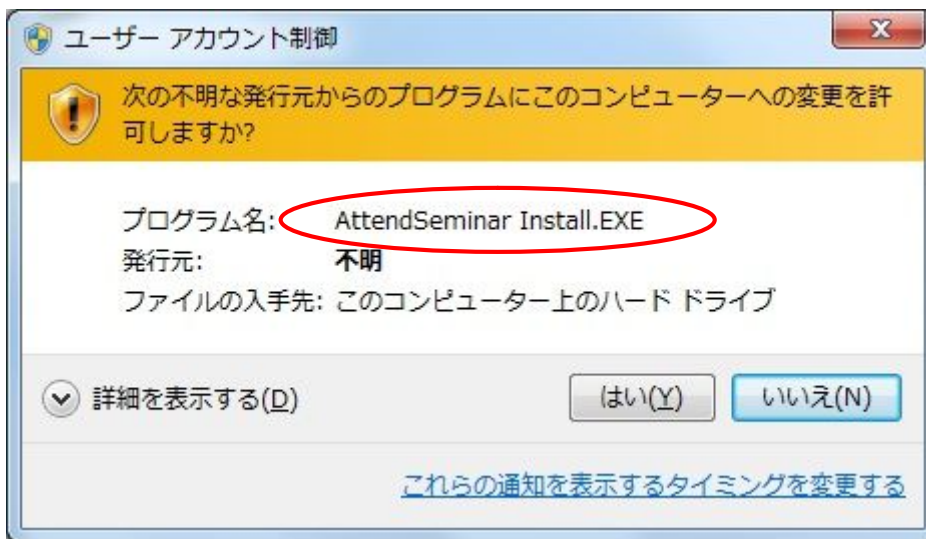

SETUP4.

当該のパソコンに Felica Port Software Version4.4.7.10 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので [SETUP11\(page11\)](#)に進んで下さい。



「はい」を選択して、Felica Port Software のインストールを開始して下さい。

「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。

SETUP5.

「はい」を選択すると、「FeliCa Port Software」(SONY 製品)のインストールが開始されます。以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

- ※ 「FeliCa Port Software」が既にインストールされている場合はその状態によって手順が異なります。
- ・「4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合」
 - ・「5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合」
- 該当する状態のページを参照して下さい。




⚠ 「FeliCa Port Software」インストール画面が「IC カード用研修受付ソフト」インストール画面の背後に表示され、表示された画面が見えない場合があります。この場合はタスクバーより「FeliCa Port Software」を選択する事で前面に表示されます。



SETUP6.

使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。

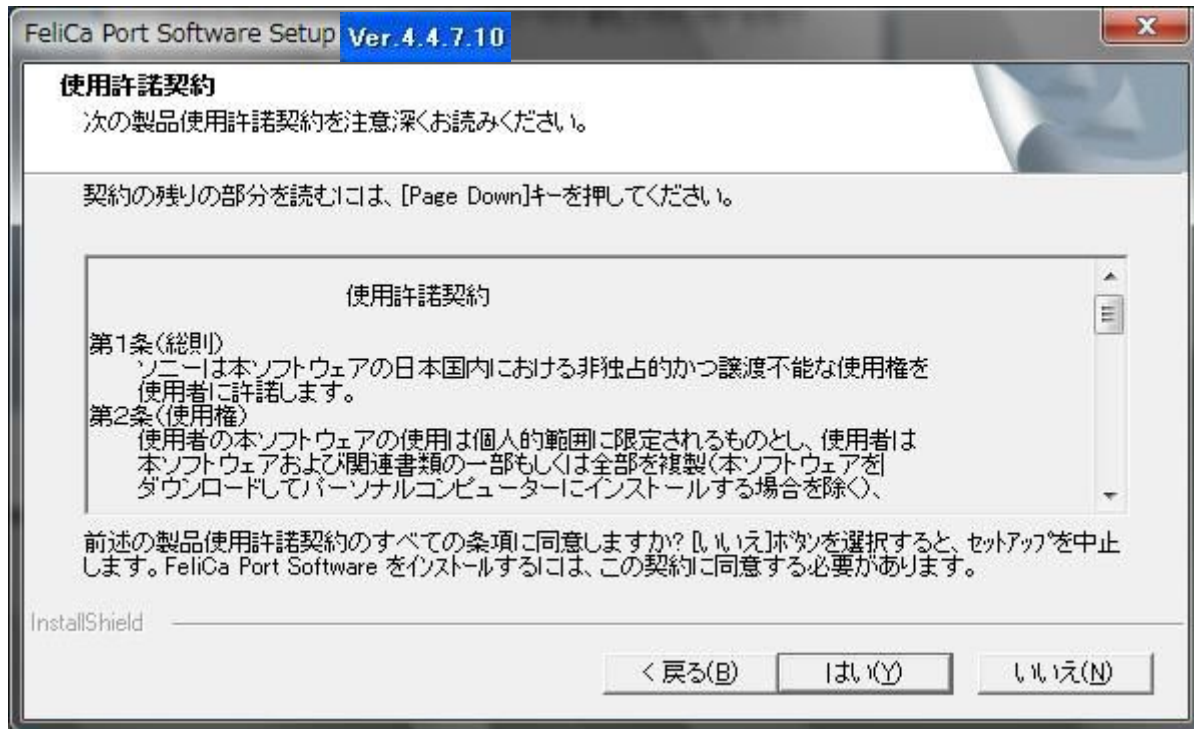

SETUP7.

FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



⚠ ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先は変更しないでください。

SETUP8.

インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。



SETUP9.

「FeliCa Port Software」のインストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。



「完了」ボタンをクリックしますと、「FeliCa Port Software」のセットアップが終了します。

SETUP10.

[SETUP2\(page7\)](#)に戻り、再度「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

SETUP11.

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。




「ボリューム C:¥は現在利用できません。別のボリュームを選択してください」とメッセージが表示され、インストールが終了する場合があります。この場合は、SETUP2 から再度作業を行って下さい。

SETUP12.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。


インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



 ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。


SETUP13.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

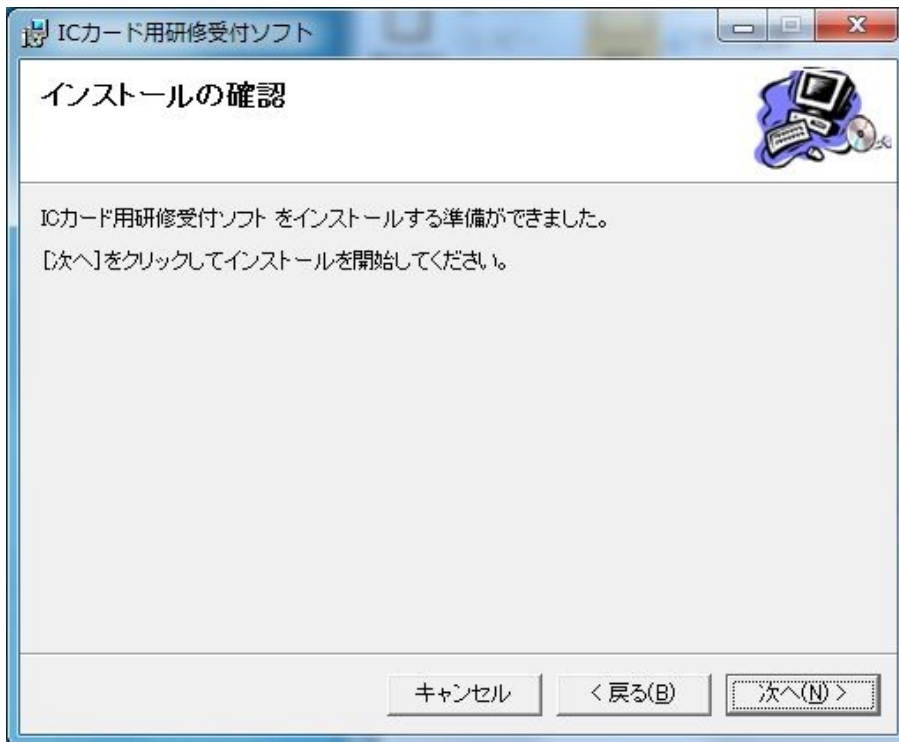


SETUP14.

インストールが開始されます。
インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。

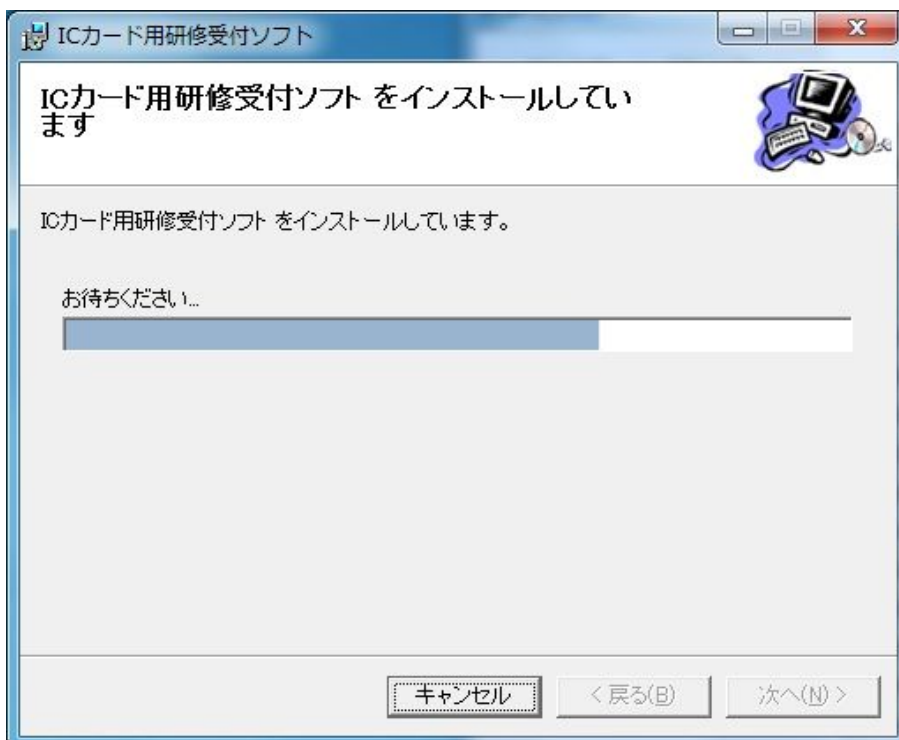

SETUP15.

全てのコンポーネント/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。

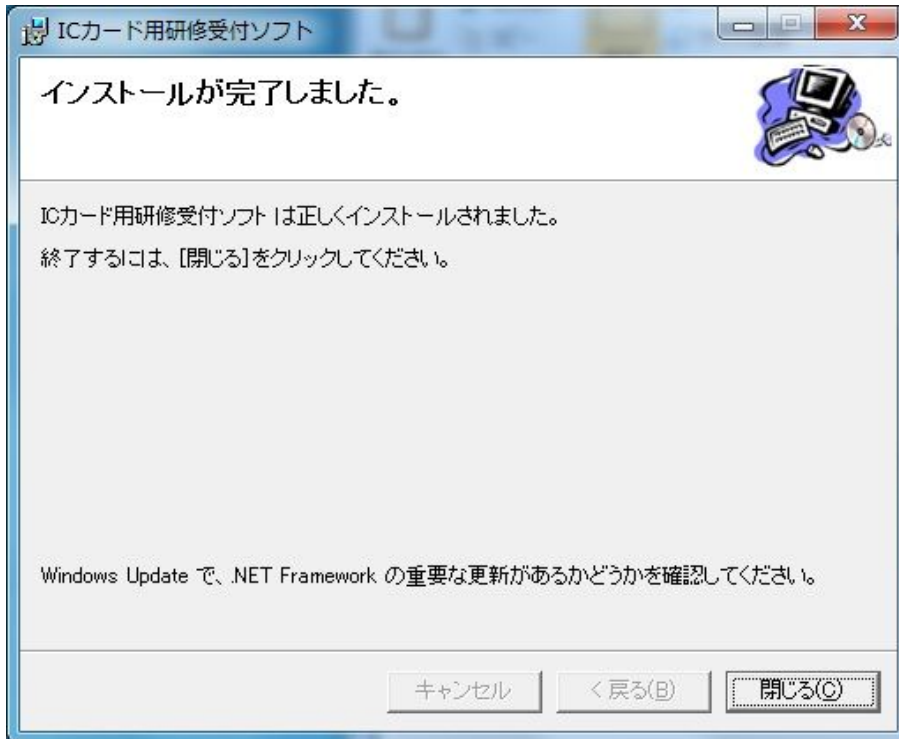**SETUP16.**

インストール完了後に、FeliCa ポート/パスリ (カードリーダー) を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。


インストール後「C:\¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

SETUP16 を終了して、これでインストールは終了です。

4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 4.1. Felica Port Software Version4.3.2.18 未満の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。


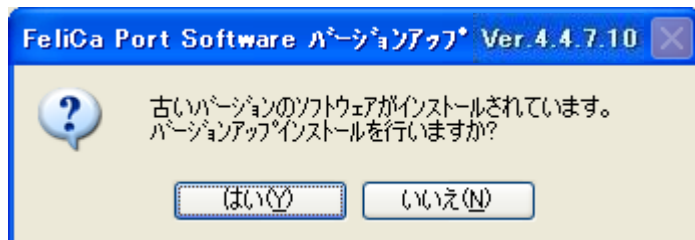


- 4.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。
- 4.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する **SETUP9** の画面が表示されます。**SETUP9(page10)**より作業を継続して下さい。

5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合

当該パソコンが FeliCa ポート内蔵 PC の場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 5.1. 当該パソコンに既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa ポートソフトウェアがインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下の 2 画面のいずれかが表示されます。
- 5.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

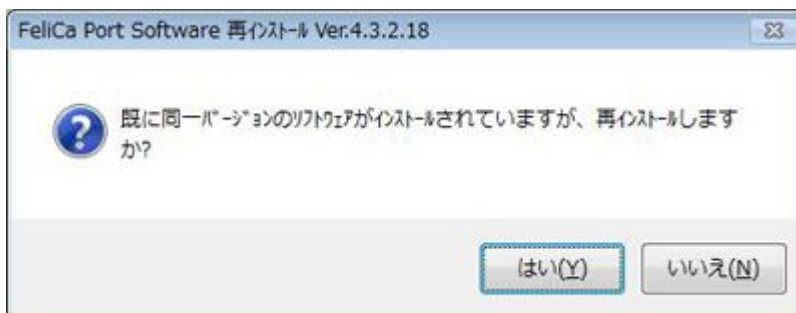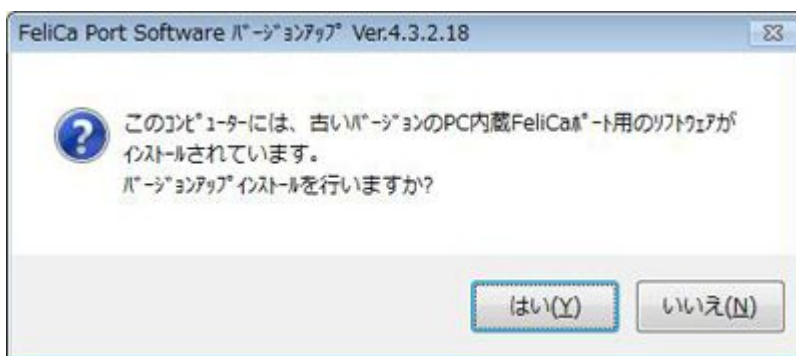


- 5.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP9 の画面が表示されます。[SETUP9\(page10\)](#)より作業を継続して下さい。

6. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合


既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。

「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。

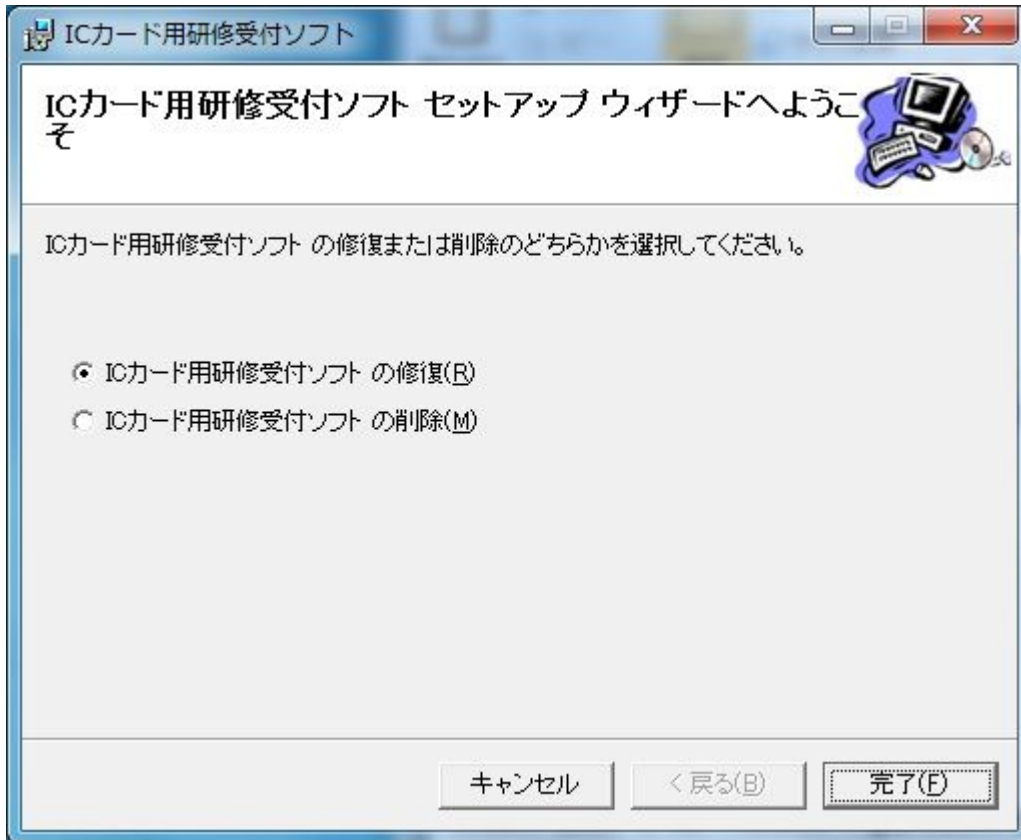


7. アプリケーションの削除方法


- 7.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
- 7.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、次に [コントロールパネル] をクリックして下の画面を表示します。

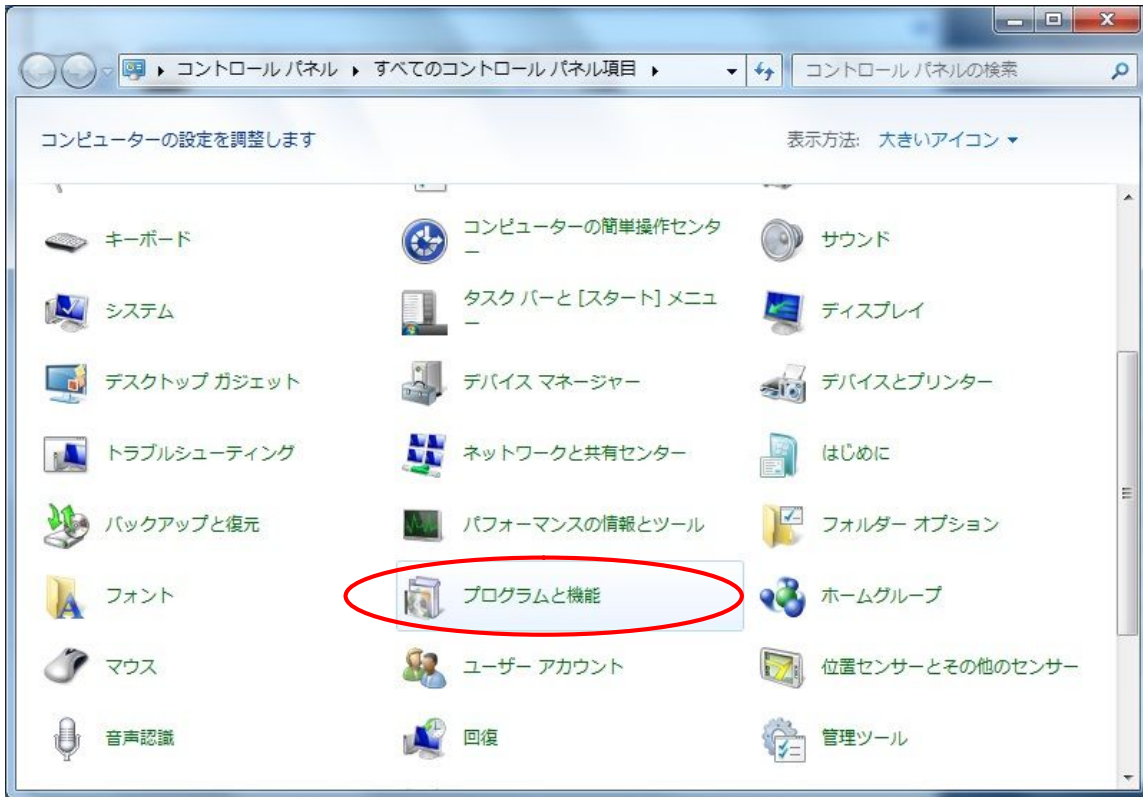


- 7.3. [プログラムと機能] をクリックします。
- 7.4. 表示されるプログラムの一覧から削除するプログラム（「FeliCa Port Software」または「IC カード用研修受付ソフト」）をクリックして選択します。
- 7.5. [アンインストール] ボタンをクリックします。

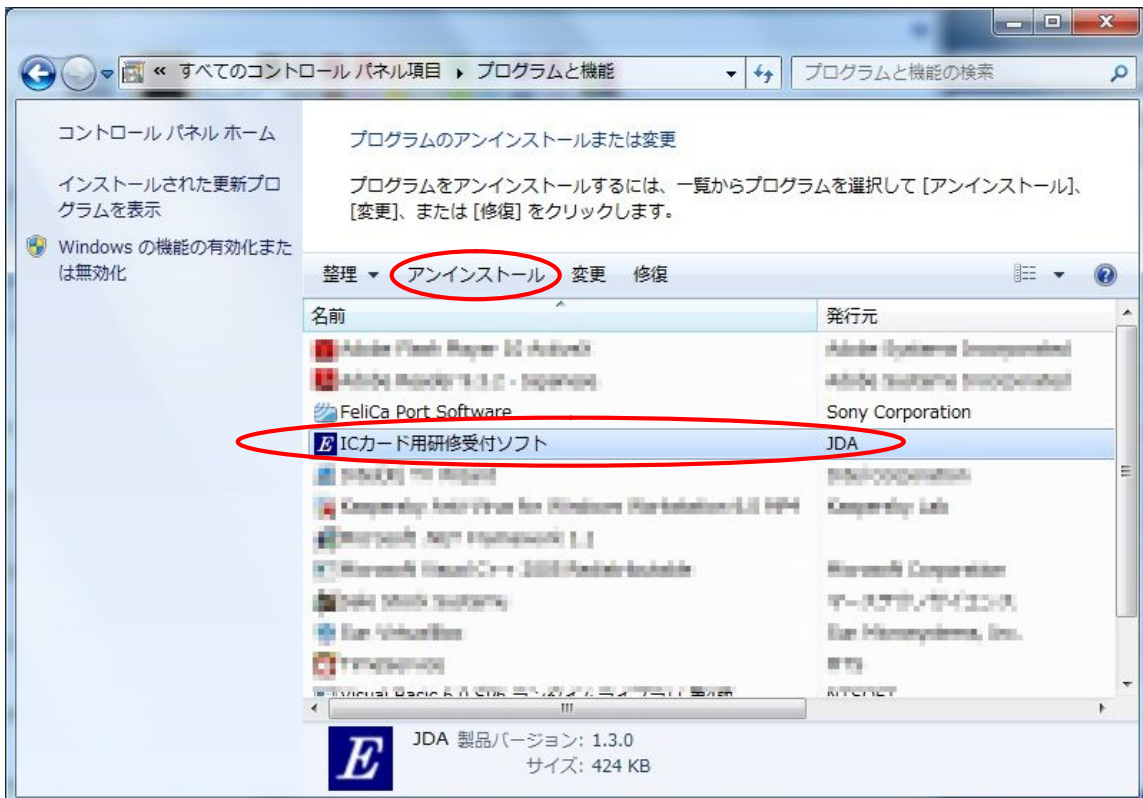

7.6. 削除の確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。

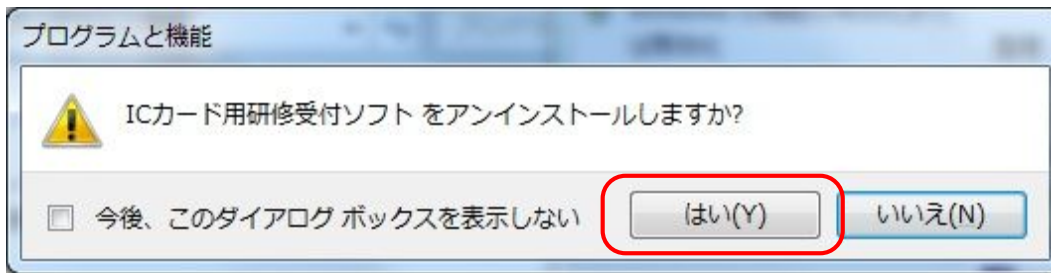

7.7. 次のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は「はい」 ボタンをクリックします。

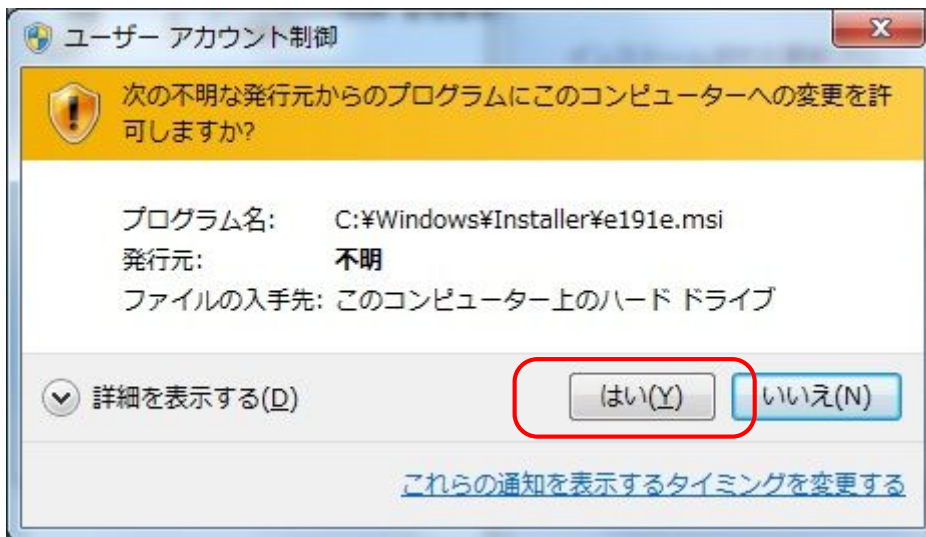

7.8. 削除の完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックして、終了します。



「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
不要な場合は、プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除して下さい。

以上